
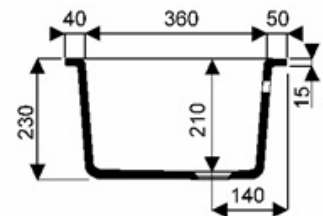
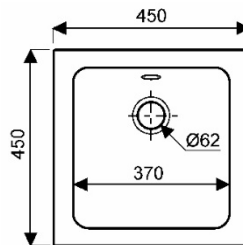
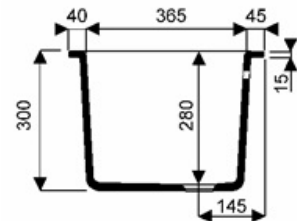
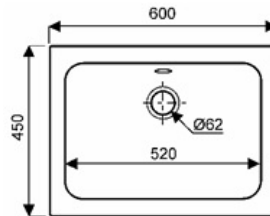


FICHE TECHNIQUE PLAN DE TRAVAIL HUMIDE CUVE EN GRES

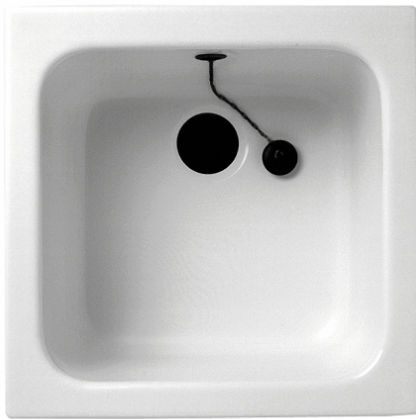

DESCRIPTIF

Cuves pour laboratoire, cuve 60 x 45 ou 45 x 45 cm

- Bonde PP 1 1/2" à bouchon, cordon, trop-plein, grille fournis, résistants aux acides.
- Fixation : à encastrer sur plan carrelé.

SOLUTION TECHNIQUE.

Pour un plan de travail de 30 mm d'épaisseur, nous utilisons un support en CTBH sur lequel nous posons un revêtement en Trespa de 8 mm qui vient en recouvrement pour avoir une finition parfaite. L'égouttoir est directement réalisé sur le Trespa. L'ensemble bordé d'une rive en PVC.

Points forts :

- Solidité garantis
- Esthétique

