


ORGUE A PARFUMS EN ETOILE

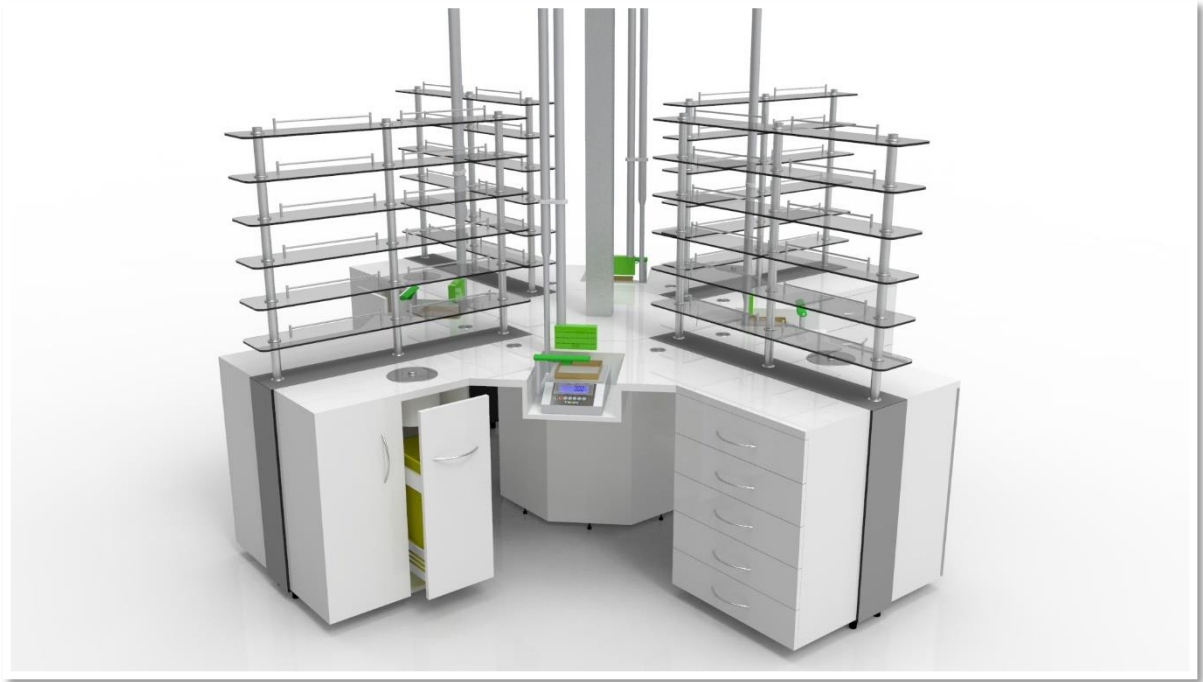

Description produit

Pour vos opérations de pesée dans le cadre de vos activités de création ou de fabrication de parfums et de cosmétiques, nous vous proposons différents modèles d'orgues à parfums, parmi lesquels cet orgue de pesée en étoile multipostes.

Cette configuration **en îlot central** dispose de **4 postes de pesée**, disposant chacun de leur **décaissé pour balance** et leur **meublier de rangement sous paillasse** adapté, ainsi que de **plusieurs niveaux d'étagères en verre** pour permettre aux opérateurs de disposer de leurs matières premières à portée de main.

Meuble métier élaboré sur mesure en fonction de vos besoins, de l'espace disponible au sein de votre laboratoire et des options que vous souhaitez.



Caractéristiques techniques

Orgue de pesée multipostes en étoile comprenant 4 postes de pesée.

L'orgue se décompose comme suit :

- Une structure centrale **octogonale en mélaminé hydrofuge**
- 4 modules fixes d'extrémité **soit 4 postes de travail pour les opérations de pesée**
- **Un poteau central en Inox** servant de support aux châssis des Smart-Flows (en option)
- **4 ensembles d'étagères en verre Sécurit sur potences inox** à 3 plots
- Nombre de niveaux d'étagères en fonction de vos besoins.
- Etagères en verre sécurité 6 mm
- Avec barres centrales de galerie en inox antichute
- **Du mobilier de rangement en partie basse**
- Revêtement du plan de travail en glace émaillée sur support CTBH
- Avec bande de rive PVC blanc extérieure
- Autre revêtement sur demande



Chaque poste de pesée comprend :


- 1 décaissé pour balance
- 1 système prends tout en inox (poubelle sur table)
- 2 modules de rangement sous paillasse : le modèle est déterminé en fonction de vos besoins (à tiroirs, à porte, à étagères, etc..)
- 2 Passe-câbles
- 3 Prises + 1 RJ45 sous paillasses

Options :


- Fil inox antichute
- Système d'aspiration intégrée
- Coins arrondis

1 orgue de pesée = 4 postes de travail

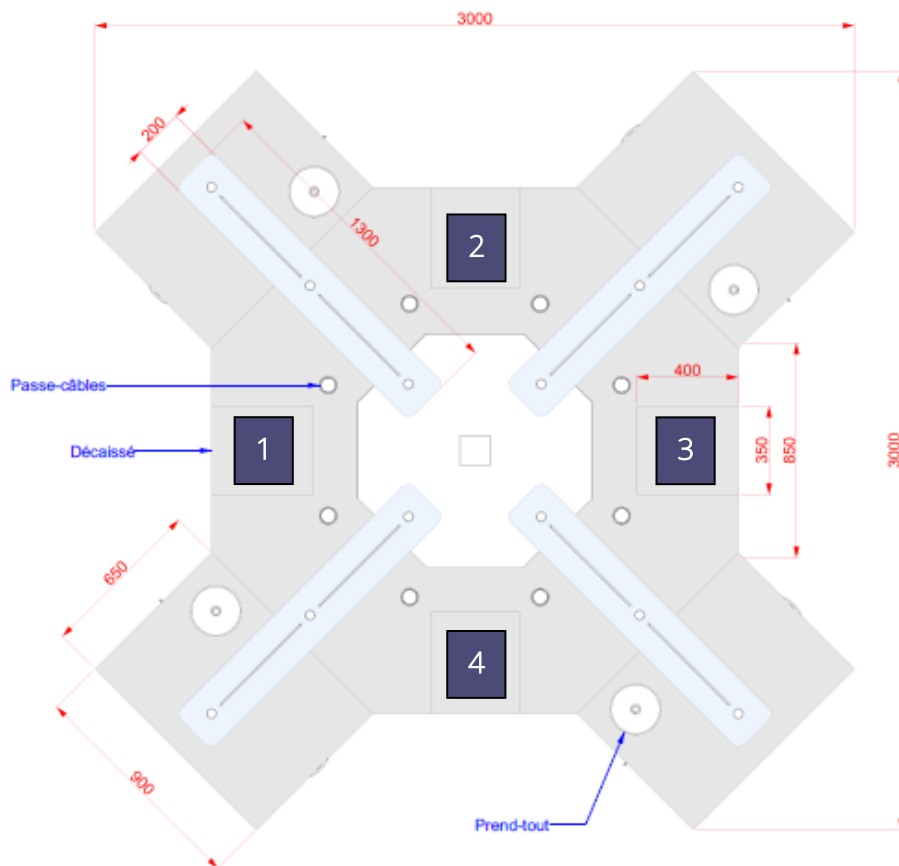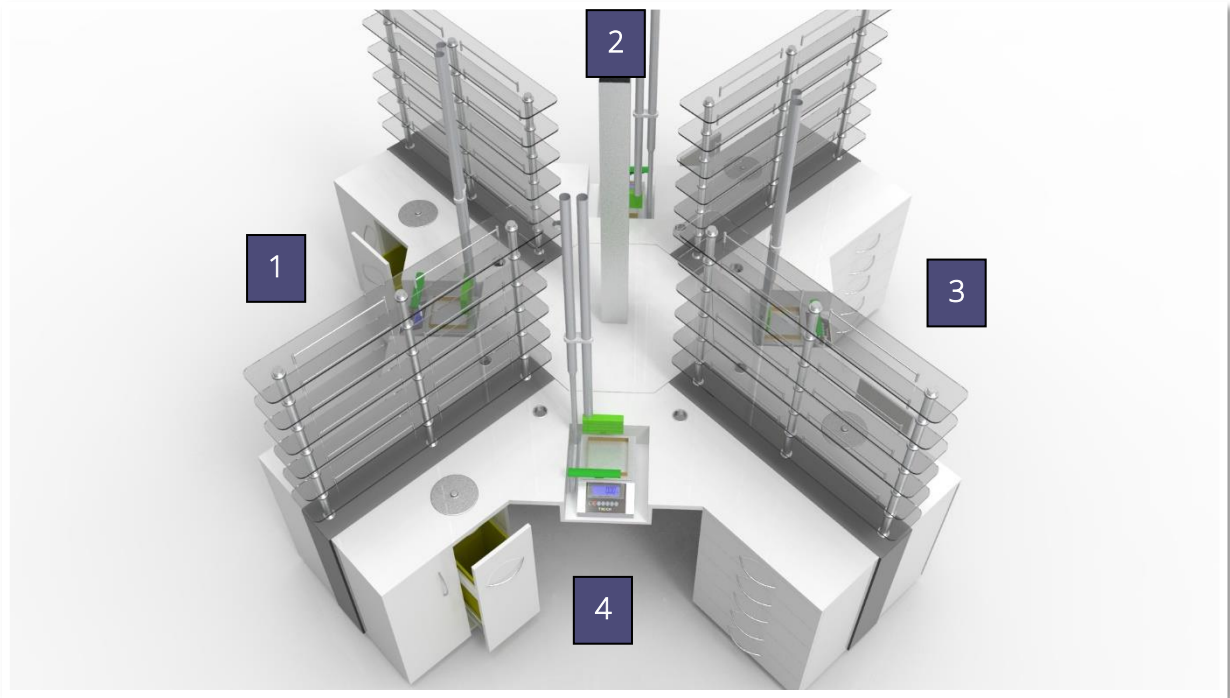

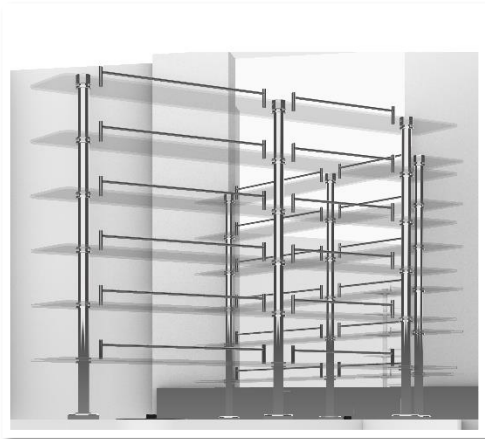

Option : Fil inox antichute

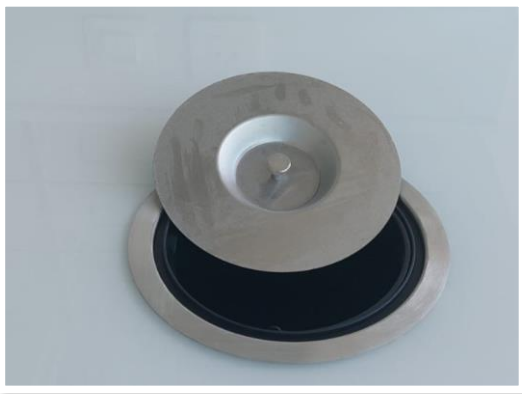

Système prend-tout
(poubelle sur table)



Option : Système d'aspiration intégrée
(balance non fournie)

Exemples d'implantations et de déclinaisons possibles

